




signia

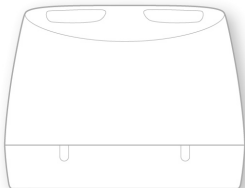

Charger BTE P/SP & RIC

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Voordat u begint	4
Componenten	6
De USB-stroomkabel aansluiten	7
Opladen	8
Correcte positie van de hoortoestellen	10
Oplaadstatus	11
Oplaadtips	12
Meer informatie	19
Onderhoud en behandeling	19
Problemen oplossen	20

Belangrijke veiligheidsinformatie	23
Algemene waarschuwingen	23
Persoonlijke veiligheid	25
Productveiligheid	30
Belangrijke informatie	32
Verklaring van symbolen	32
Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden	34
Technische gegevens van de voedingsadapter	36
Verwijderingsinformatie	36
Conformiteitsinformatie	37
Specifieke nationale informatie	39

Voordat u begint

Dit apparaat is bedoeld om de ingebouwde accu's (oplaadbare lithium-ionbatterijen) in onze specifieke hoortoestellen op te laden. Uw audicien zal u meer informatie geven over de compatibele modellen.

De lader is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Neem de gebruiksomstandigheden in het hoofdstuk "Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden" in acht.

De lader is niet bedoeld als opslagmiddel voor het vervoer van hoortoestellen.




VOORZICHTIG

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig en volledig door en volg de veiligheidsinformatie in dit document op om schade of letsel te voorkomen.



Uw toestel kan er iets anders uitzien dan de afbeeldingen in deze handleiding. We behouden ons het recht voor de wijzigingen door te voeren die we noodzakelijk achten.

Componenten

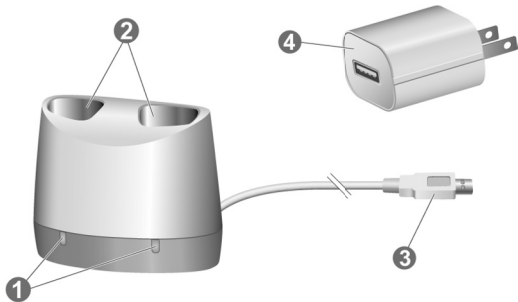

1 Status-LED's


2 Oplaadopeningen

3 Niet-afneembare usb-stroomkabel

4 Stroomadapter

De USB-stroomkabel aansluiten

- ▶ Sluit de usb-stroomkabel aan op de meegeleverde stroomadapter.

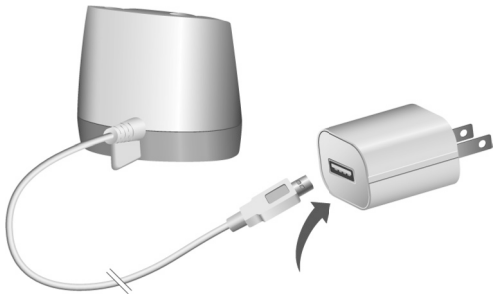

Opladen



AANWIJZING

Zorg dat de stroomstekker goed bereikbaar is zodat deze zo nodig kan worden losgehaald van de stroomvoorziening.

- ▶ Sluit de lader aan op de voeding.

De LEDs voor iedere laadopening knipperen 3 keer om aan te geven dat de lader stroom heeft en klaar is voor gebruik.

- ▶ Plaats het hoortoestel in de oplaadopeningen, zoals getoond op de afbeelding. U kunt beide hoortoestellen tegelijk opladen. De hoortoestellen worden automatisch uitgeschakeld en beginnen op te laden. De oplaadstatus wordt aangegeven, zie tabel "Oplaadstatus" op de volgende pagina's.



- ▶ Verwijder de hoortoestellen uit de lader als u ze wilt gebruiken. Ze worden automatisch ingeschakeld.
- ▶ U kunt de lader aangesloten laten of verwijderen uit de voeding.


Correcte positie van de hoortoestellen


- ▶ Tenzij anders aangegeven, kunnen de linker en rechter hoortoestellen in elk van de oplaadopeningen worden geplaatst. De openingen hebben geen specifieke kant.
- ▶ Controleer of de onderkant van de hoortoestellen naar behoren in de oplaadopeningen is geplaatst. Als de hoortoestellen goed zijn geplaatst, wordt dit aangegeven door de LED.




Oplaadstatus

LED	Statusbeschrijving
-----	--------------------

	Geen LED: De lader is niet aangesloten op de voedingsbron. Er is geen hoortoestel geplaatst in de overeenkomstige laadopening of het hoortoestel is niet naar behoren geplaatst.
---	--

	3 keer knipperende groene LED De lader is aangesloten op de voedingsbron en klaar om te laden.
---	--

	Knipperende groene LED: Bezig met laden...
---	---

LED Statusbeschrijving



Constant groene LED:
Het hoortoestel is volledig opgeladen.



3 keer in 2 seconden knipperende rode LED: Fout
Lees meer in hoofdstuk "Problemen oplossen".

Oplaadtips

Mogelijk hebt u vragen over hoe u uw hoortoestellen het beste kunt opladen. Lees de vragen en antwoorden hieronder. Als u meer vragen hebt, dan zal uw audicien u hierbij helpen.



Hoe vaak moet ik de hoortoestellen opladen?

Wij bevelen aan om de hoortoestellen dagelijks op te laden, ook als de accu niet leeg is. Laad ze 's nachts op, zodat u uw dag kunt starten met volledig opgeladen hoortoestellen.



Hoe lang duurt het opladen?

Een volledige oplaadcyclus duurt ongeveer 3 tot 4 uur.

Na 30 minuten kunt u uw hoortoestellen tot 7 uur lang gebruiken.

Oplaadtijden kunnen variëren afhankelijk van het gebruik van de hoortoestellen en de ouderdom van de accu.



Mag ik het hoortoestel in de lader achterlaten?

Ook wanneer ze volledig zijn opgeladen, kunt u de hoortoestellen in de lader achterlaten. Ze stoppen automatisch met laden wanneer ze volledig zijn opgeladen.



Wat gebeurt er wanneer ik ze ben vergeten op te laden?

Uw hoortoestellen worden automatisch uitgeschakeld wanneer de accu leeg is. Laad de hoortoestellen zo snel mogelijk op.

Hoortoestellen die langer dan 6 maanden niet zijn opgeladen, kunnen beschadigd zijn door een niet-herstelbare diepe ontlading van de accu. Diep ontladen accu's kunnen niet meer worden opgeladen en moeten worden vervangen.



Wat als ik van plan ben de hoortoestellen enkele dagen of langer niet te gebruiken?

- Opslag voor korte tijd (tot enkele dagen): Schakel uw hoortoestellen uit met de drukknop of plaats ze in de op het stroomnet aangesloten lader.

De lader moet aangesloten zijn op de voedingsbron.

Als de lader niet op de voedingsbron is aangesloten en u de hoortoestellen in de lader plaatst, dan worden de hoortoestellen **niet** uitgeschakeld.

Let op: als u de hoortoestellen uitschakelt met een afstandsbediening of smartphone app, dan worden de hoortoestellen **niet** volledig uitgeschakeld. Ze bevinden zich in standby-stand en verbruiken nog een beetje stroom.

- Opslag voor lange tijd (weken, maanden, ...): Laad eerst volledig uw hoortoestellen op. Schakel ze uit met de drukknop voordat u ze opbergt. Wij raden aan om droogproducten te gebruiken bij het opbergen van de hoortoestellen.

Elke 6 maanden moet u de hoortoestellen opladen om een niet-herstelbare diepe ontlading van de accu te voorkomen. Diep ontladen accu's kunnen niet meer worden opgeladen en moeten worden vervangen. Wij bevelen aan om de accu's vaker dan om de 6 maanden op te laden.

Leef de opslagomstandigheden na in de gebruiksaanwijzing van de hoortoestellen.

Informeer bij uw audicien naar aanbevolen droogproducten.



Waarop moet ik letten bij het opladen?

De hoortoestellen en de lader moeten schoon en droog zijn. Houd rekening met de gebruiksomstandigheden in het hoofdstuk "Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden". Vermijd het opladen bij hoge omgevingstemperaturen, aangezien dit de levensduur van de accu kan verkorten.

Let op: als u de lader gebruikt in een heel warme omgeving, dan stopt deze met opladen om af te koelen als de temperatuur van de lader 45 °C overschrijdt. Als dit gebeurt, knippert de LED 3 keer binnen 2 seconden. Het opladen wordt automatisch hervat als het apparaat is afgekoeld. Raak de hoortoestellen niet aan, ze kunnen warm zijn.



Waarop moet ik letten wanneer ik een stekkerdoos met energiebesparende functies gebruik?

- Zet de stekkerdoos aan **voordat** u de hoortoestellen in de lader plaatst. Anders is het mogelijk dat de lader de hoortoestellen niet detecteert.
- Zet de stekkerdoos niet uit **terwijl** de hoortoestellen zich in de lader bevinden. Anders gaan de hoortoestellen automatisch aan en beginnen ze te ontladen in de lader. Verwijder voordat u de stekkerdoos uitschakelt de hoortoestellen uit de lader en schakel ze uit met de drukknop.

Meer informatie

Onderhoud en behandeling



AANWIJZING

Gevaar voor verwonding door elektrische schok!

- ▶ Maak de lader los van de voeding als het apparaat moet worden gereinigd.
- ▶ Reinig de lader met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel de lader nooit onder in water.
- ▶ Steriliseer of desinfecteer de lader niet.
- ▶ Na gebruik en voor het plaatsen van de lader de laadpinnen op de hoortoestellen schoonmaken met een zacht, droog doekje om vet en vocht te verwijderen

Problemen oplossen

Problemen en mogelijke oplossingen

LED brandt niet

- Controleer of de voeding naar behoren is aangesloten.
-

LED knippert 3 keer rood

Er is een fout opgetreden in de lader.

- Neem de hoortoestellen uit de lader en ontkoppel de lader van de voeding.
 - Sluit de lader opnieuw aan op de voeding en plaats de hoortoestellen opnieuw in de oplaadopeningen.
 - De lader heeft zijn temperatuurgrens bereikt en moet afkoelen. Het laden wordt hervat zodra de temperatuur is gedaald tot onder 45 °C.
-

Als de LEDs nog steeds rood knipperen:

- Neem de hoortoestellen uit de lader en ontkoppel de lader van de voeding.
- Neem contact op met uw audicien voor ondersteuning.

Neem contact op met uw audicien als u verdere problemen ondervindt.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene waarschuwingen

- Neem de gebruiksomstandigheden in acht. Zie het hoofdstuk "Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden".
- Let er in het bijzonder op dat u uw toestel beschermt tegen extreme hitte (bv. vuur, magneton, inductiefornuis of andere hoge inductievelden) en zonlicht.
- Laad uw hoortoestellen alleen op met de goedgekeurde lader. Vraag uw audicien om hulp.
- Het toestel niet demonteren.
- Het toestel niet gebruiken in explosieve omgevingen.

- Gebruik geen hoortoestellen die vervormd of duidelijk beschadigd zijn.
- Het toestel niet gebruiken als zijn prestaties na het opladen sterk vermindert. Breng het toestel terug naar uw audicien.
- Het toestel niet weggooien in vuur of water.

Breng in alle bovenstaande gevallen uw toestel terug naar de audicien.



WAARSCHUWING

Risico van elektrische schok!

- ▶ Sluit de oplader alleen aan met een USB-stroomkabel die voldoet aan IEC 60950-1 en/of IEC 62368-1.

Persoonlijke veiligheid



WAARSCHUWING

Gevaar voor brandwonden!

- ▶ Plaats alleen uw hoortoestellen in de lader.



WAARSCHUWING

Risico van elektrische schok!

- ▶ Gebruik klaarblijkelijk beschadigde apparaten niet en breng ze terug naar het verkooppunt.



WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar!

Uw apparatuur bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

- ▶ Houd hoortoestellen, batterijen en accessoires buiten het bereik van kinderen en van mensen met een verstandelijke beperking.
- ▶ Raadpleeg, als onderdelen zijn ingeslikt, onmiddellijk een arts of ga naar een ziekenhuis.



WAARSCHUWING

Houd er rekening mee dat alle onbevoegde veranderingen aan het product schade aan het product of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

- ▶ Alleen gebruik van goedgekeurde onderdelen en accessoires is toegestaan. Vraag uw audicien om hulp.



WAARSCHUWING

Risico van explosie!

- ▶ Gebruik uw apparatuur niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst (bijv. in de mijnbouw).



WAARSCHUWING

Oplaadsystemen kunnen interfereren met meetapparatuur en elektronische apparatuur.

- ▶ In ziekenhuizen: De lader voldoet aan CISPR 35 en CISPR 32. Daarom zou het gebruik van de lader in ziekenhuizen toelaatbaar moeten zijn. Niettemin kan de lader interfereren met zeer gevoelige apparaten. In deze gevallen moeten gepaste maatregelen worden getroffen (de afstand tot gevoelige apparaten verhogen of de lader loskoppelen van de voedingsbron).



WAARSCHUWING

Interferentie met implanteerbare toestellen

- ▶ Het toestel kan gebruikt worden met alle elektronische implantaten die overeenkomen met ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, de norm betreffende elektromagnetische compatibiliteit voor menselijke implantaten.
- ▶ Indien uw implantaat niet voldoet aan de norm ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, moet u contact opnemen met de fabrikant van uw implanteerbare apparaat voor informatie over het storingsrisico.

Productveiligheid



AANWIJZING

- ▶ Bescherm uw apparatuur voor extreme hitte. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht.



AANWIJZING

- ▶ Bescherm uw apparatuur voor hoge luchtvochtigheid.



AANWIJZING

- ▶ Droog uw apparatuur niet in de magnetron.



AANWIJZING

- ▶ Niet laten vallen. Interne componenten kunnen beschadigd raken.



AANWIJZING

- ▶ Het toestel niet demonteren.



AANWIJZING

Het gebruik van incompatibele onderdelen houdt een risico van storing in.

- ▶ Gebruik alleen de voedingsbron en landspecifieke adapter die met de lader is geleverd.

Belangrijke informatie

Verklaring van symbolen

In dit document gebruikte symbolen



Duidt op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw apparaat.

Symbolen op het apparaat of de verpakking



CE-conformiteitslabel, bevestigt de conformiteit met bepaalde Europese Richtlijnen, zie hoofdstuk "Conformiteitsinformatie".



Geeft de wettelijke fabrikant van het apparaat aan.



Werp het apparaat niet weg met gewoon huishoudelijk afval. Lees meer in het hoofdstuk "Verwijderingsinformatie".



Lees de instructies in deze gebruiksaanwijzing en neem deze in acht.



Medisch hulpmiddel

Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur

10-35 °C

50-95 °F

Relatieve luchtvochtigheid

20-75%

Atmosferische druk

700-1060 hPa

Neem tijdens langdurige periodes van transport en opslag de volgende voorwaarden in acht:

	Opslag	Transport
Temperatuur	10-40 °C 50-104 °F	-20-60 °C -4-140 °F
Relatieve luchtvochtigheid	10-80%	5-90%
Atmosferische druk	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Voor andere onderdelen, zoals hoortoestellen, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

Technische gegevens van de voedingsadapter

Ingangsspanning: 100-240 V wisselstroom

Ingangsstroom: 0,5 A

Ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz

Uitgangsspanning: 5 V DC

Uitgangsstroom: 1 A

Verwijderingsinformatie

Recycle hoortoestellen, accessoires en de verpakking volgens de lokale voorschriften.

Vermijd milieuvervuiling, gooi geen hoortoestellen bij het huishoudelijk afval. Gooi hoortoestellen weg volgens de lokale voorschriften.

Conformiteitsinformatie

De CE-markering geeft conformiteit met de volgende Europese richtlijnen aan:

- Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad (medische hulpmiddelen)
- 2011/65/EU RoHS betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen



De CE-markering bevestigt de conformiteit met bepaalde Europese richtlijnen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen van www.wsaud.com/signia.

Dit apparaat voldoet aan deel 15B van de FCC-regels en aan CAN ICES-003 / NMB-003.

De werking moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken,
- dit apparaat moet bestand zijn tegen het ontvangen van interferentie, inclusief interferentie die kan leiden tot een ongewenste werking en
- de gebruiker moet gedurende het laadproces een minimale afstand bewaren van 20 cm (8 inch).

Specifieke nationale informatie

 **Wettelijke fabrikant**

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Denemarken

Document No. 04411-99T02-5400 NL

Order/Item No. 110 008 01

Master Rev03, 03.2021

© 04.2021, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net